




**RECUERDA QUE DEBERÁS ACUDIR A LA ADMISIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO SELECCIONADO PARA RECOGER EL KIT DE AUTOTOMA PARA REALIZAR LA PRUEBA EN HORARIO DE 08.00 A 13.00**

### 1. ¿En qué consiste?

El kit contiene un **aplicador estéril** que le permite hacerse la prueba en casa. Utilizando este dispositivo puede obtener **muestras de células vaginales** de manera sencilla y sin dolor. Estas muestras celulares se analizan posteriormente en el laboratorio.

### 2. ¿Qué aspecto tiene el aplicador?

El dispositivo tiene **18 cm de largo** y consta de una **envoltura exterior transparente con alas**. Dentro de la envoltura exterior hay una **varilla rosa** con un **ébolo rosa en un extremo** y un **cepillo blanco en el otro**. En el extremo del cepillo, se encuentra un **tapón rosa** que encaja en la envoltura exterior con un clic. Cuando quite el tapón, puede sacar el **cepillo blanco** de la envoltura exterior empujando el ébolo rosa en la dirección de la carcasa transparente.

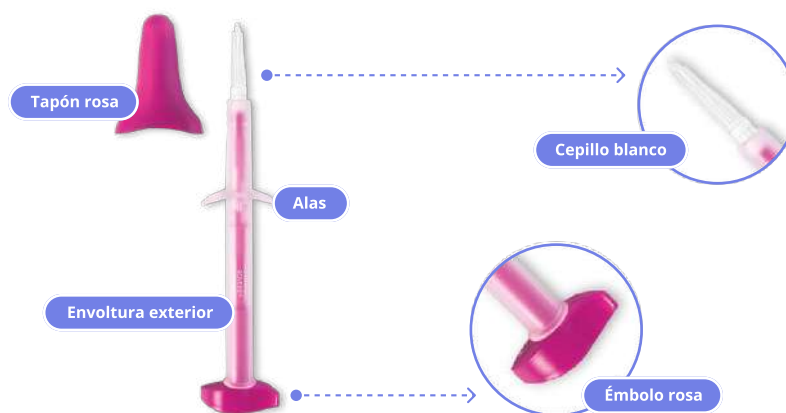

#### Información importante sobre el kit para la prueba

- No debe utilizarse en caso de que el embalaje se encuentre **dañado** o si ha pasado la **fecha de caducidad**.
- No lo utilices durante la **menstruación**.
- No lo utilices durante el **embarazo** o en los **tres meses posteriores** al mismo.
- No utilices ningún **producto vaginal** durante un mínimo de dos días antes de utilizar el kit de autotoma. Los **anticonceptivos vaginales**, condones y lubricantes con base acuosa se pueden utilizar con normalidad.
- Es de **un solo uso**. Una **reutilización** puede acarrear una **infección** y un **diagnóstico incorrecto**.
- No realizar si se han mantenido **relaciones sexuales** en las **24 horas anteriores**.

### 3. ¿Cómo realizarte la prueba?



**Lávate las manos** antes de utilizarlo.




Saca el dispositivo del envase. **No tires el embalaje**, ya que es necesario para enviarlo al laboratorio después de su uso.




Presiona los laterales del tapón rosa con el pulgar y el índice para retirarlo. **Asegúrate de no tocar las cerdas blancas del cepillo con las manos**.



Ponte de pie para tomar la muestra. **Adopta una postura cómoda** (por ejemplo, como si fueras a colocarte un tampón).

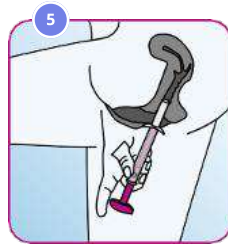


Abre los labios de la vulva con una mano, y con la otra, **inserte el dispositivo en la vagina** hasta que las alas toquen los labios.

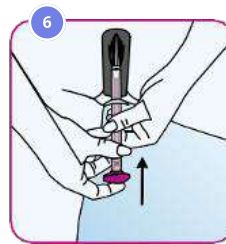


Sostén la envoltura exterior transparente con una mano, y con la otra mano, **empuja el émbolo de color rosa** en la dirección de la envoltura transparente. **Escucharás y notarás un clic cuando el cepillo se encuentre en la posición correcta** con el émbolo rosa en contacto directo con la envoltura exterior.



**Gira el émbolo rosa cinco veces en la misma dirección.** Después de cada rotación, escucharás un clic. Esto te ayudará a contar las rotaciones. Después de girar el émbolo cinco veces, **retira el dispositivo con cuidado.**

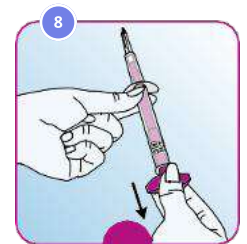


Sostén la envoltura exterior transparente con una mano, y con la otra mano, **empuje el émbolo de color rosa hasta que el cepillo blanco desaparezca en la envoltura transparente.** Al hacer esto, no toque la parte superior por encima de las alas.

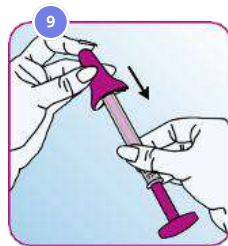

Sujeta por el extremo transparente para garantizar que el cepillo blanco no vuelve a salir. **Vuelve a colocar el tapón rosa en el dispositivo utilizando el pulgar y el índice.** Escucharás un clic cuando encaje correctamente en su sitio.



Vuelve a **colocar el dispositivo en el embalaje.**

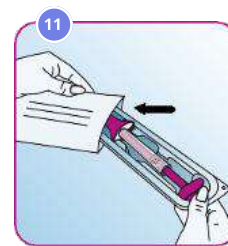

**Coloca la muestra en la bolsa de plástico suministrada y ciérrala.** Mantén la muestra a temperatura ambiente hasta el momento de la entrega.

### 4. Entrega de la muestra

Deberás realizar la entrega el **mismo día o al día siguiente** en el laboratorio de análisis clínicos del centro donde realizaste la recogida **en horario de 8:00 a 13:00 h.**

#### Resultados

El plazo de entrega de los resultados es de **7 días laborables.** El informe de resultados debe ser evaluado en una consulta con un médico de cabecera o especialista teniendo en cuenta la clínica del paciente.



Si tienes alguna duda sobre la prueba mándanos un mail a [geneticaqs@quironsalud.es](mailto:geneticaqs@quironsalud.es)